




Más volumen

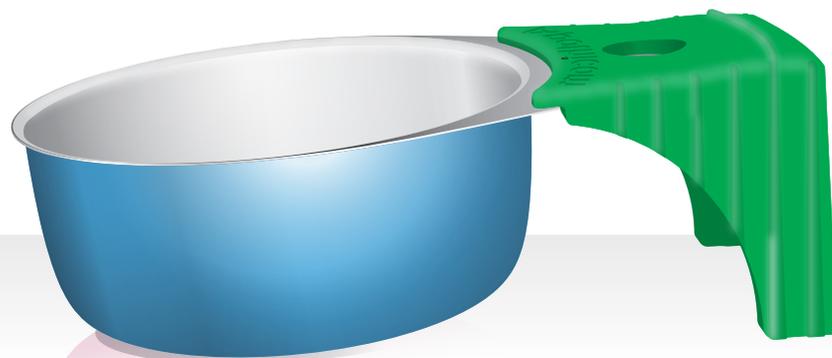

Maxicup® es un recipiente estéril de un solo uso de 5 ml, disponible en 5 colores para evitar que se comparta accidentalmente. Se ha creado como complemento del Stericup® para evitar el uso de recipientes improvisados a la hora de preparar productos que necesiten un mayor volumen para su disolución.

Objetivos

- Promover el uso único y personal de recipientes estériles para reducir los riesgos asociados a la preparación de la inyección.
- Fomentar la adopción de un método de preparación aséptico y reducir los riesgos de contaminación bacteriana (absceso, endocarditis...) asociados a la utilización de cucharas, filtros y algodón seco no estériles.
- Reforzar las estrategias de identificación del material personal mediante colores y reducir los riesgos de transmisión de virus (VIH y hepatitis B o C) por compartir material o reutilizar recipientes, filtros o compresas.

Propiedades

Cada Maxicup® contiene:

- **Una cazoleta estéril**
 - Capacidad máxima de 5 ml que permite calentar fácilmente una solución de 3,5 ml.
 - Superficie interior plana para que sea más estable.
 - Aleación de aluminio de inocuidad demostrada.
 - Gracias al material empleado y su bajo espesor, el Maxicup® se desgasta después del primer uso para limitar la tentación de reutilizarlo.
- **Un mango de plástico** para evitar quemaduras en los dedos.
- **Un filtro de algodón estéril**
 - Debido a su reducido tamaño, este filtro de algodón retiene menos producto que los filtros de cigarrillos y otros filtros improvisados que se utilizan habitualmente.
 - Su elevada densidad garantiza una filtración más eficaz.
 - Fomenta el uso único de filtros.
- **Una compresa estéril postinyección**
 - Permite comprimir la vena después de la inyección para favorecer la cicatrización y proteger el capital venoso.
 - Permite absorber la sangre y evitar la transmisión vírica a través de las manos.

Historia clínica

Maxicup® se ha desarrollado desde el 2011 en programas de reducción de daños en Francia. Su eficacia e inocuidad han sido aprobadas en pruebas de laboratorio y se ha probado con comprimidos y cápsulas (buprenorfina y sulfato de morfina calentado). Con el apoyo de la autoridades de salud pública, esta siendo distribuido en farmacias y programas de reducción de daños en varios países del mundo. Desde el 2019, tiene un mango sobremoldeado para una mayor estabilidad.

Maxicup® es un dispositivo médico con marcado CE.



Apothicom

www.apothicom.org